

Scene & Heard



Användarmanual

Version 3.0



Hemsida.....	1
Använd en scen.....	3
Lägg till en scen.....	6
Uppgift Prompting.....	17
Schemaläggning.....	21
Inställningar.....	22



När du öppnar Scene & Heard första gången kommer du till ditt scenbibliotek.





Ikonerna längst upp på sidan (från vänster till höger) Inställningar, Kommunikationsbok, Scenschema, Ordna Scenbibliotek, Redigera Scen

Communication book Scheduler Add Scene/ Task Reorder Edit Scene/Task

The screenshot shows the TherapyBox app interface. At the top is a blue navigation bar with the word "BIBLIOTEK" in white. On the left side of the bar are three icons: a gear (settings), a camera (communication book), and a clock (scheduler). On the right side are three icons: a list with arrows (reorder), a plus sign (add scene/task), and a square with a pencil (edit scene/task). Below the bar is a grid of scene thumbnails. The first row has three large thumbnails: "Klossar" (children playing with blocks), "I Parken" (children sitting on a bench), and "Måla" (children painting). The second row has a grid of six small thumbnails on the left labeled "Min Skoldag", a "Klassrum" (classroom) thumbnail, and a "Café" thumbnail. The third row has a "Hus" (house) thumbnail, a "Kök" (kitchen) thumbnail, and an "I Affären" (grocery store) thumbnail.



Knacka på skärmen för att öppna.





Knacka på skärmen för att öppna.Hotspots täcker ett område på bilden.
Genom att knacka på den spelas mediet upp.Media inkluderar även ljudinspelningar, uppläst text med iOS-röst, videoinspelning eller en symbol.
Du kan också länka till en ny scen genom att använda hotspot.

Hotspots





Symbolerna visas längst ner. Du kan också göra om media till symboler.



Spik


Fingrar

Aj!

Symbol




För att lägga till en ny scen knacka på "lägg till"-knappen. Välj knappen för scener.

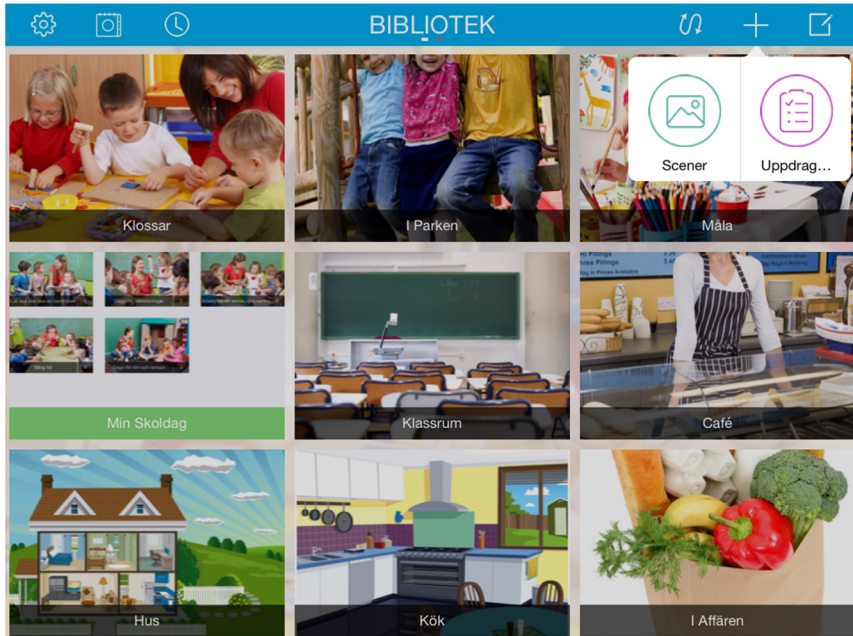



Scener

Välj Importera från kamera, Rita en ny scen eller kopiera en existerande scen. Du kan också se bilder från ditt iPad-galleri vilka du kan använda.

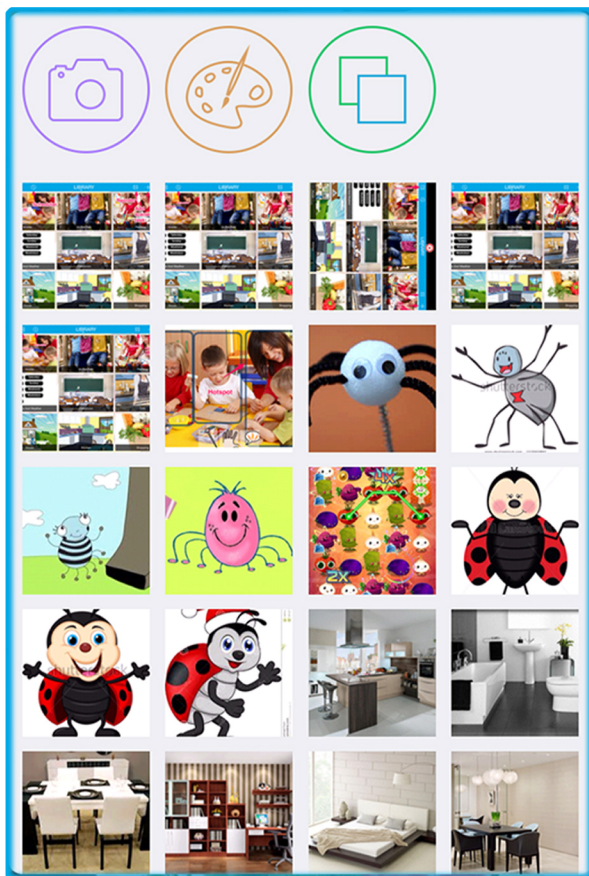




Knacka på ikonen för att Rita ny scen och du kan skapa din egen scen genom att använda vår nya roliga måla-funktion.

Välj en svart eller vit canvas till vänster, eller ta ett foto att rita över.

Om du knackar på kameraikonen kan du ta ett foto direkt eller knacka på galleriikonen för att välja ett foto från ditt iPad-galleri.

Färgpalettsknappen ger dig möjlighet att välja vilken färg du vill rita med.

Suddgummit gör det möjligt att sudda it misstag.

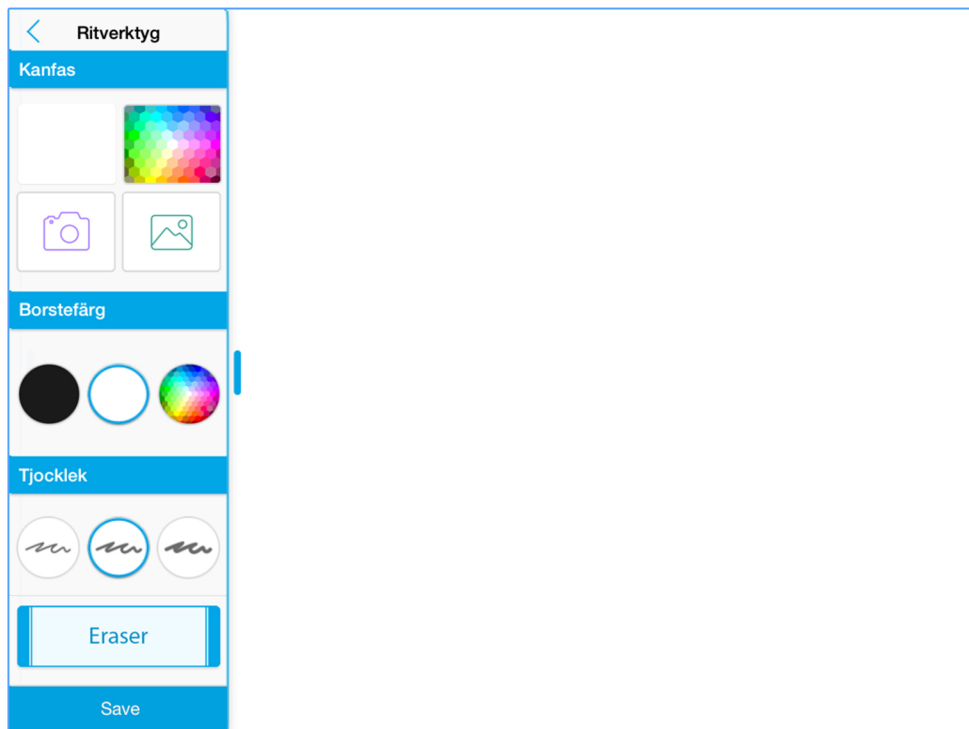

Lägg till en scen



När du är nöjd med din bild, tryck på spara.

Kopiering av en scen kommer att återskapa en av scenerna i ditt bibliotek men ger dig möjlighet att döpa om den.

På detta sätt kan du göra små förändringar till en scen och samtidigt behålla originalet.

Knacka för att välja Scen/Uppgift att kopiera.

 <p>Klossar</p>	 <p>I Parken</p>	 <p>Måla</p>
 <p>Min Skoldag</p>	 <p>Klassrum</p>	 <p>Café</p>
 <p>Hus</p>	 <p>Kök</p>	 <p>I Affären</p>



När du väl har en bild kommer du att guidas genom redigering av scener.

Ge scenen ett namn.

Du har redan en hotspot.

Knacka och håll om hörnen för att ge den en ny form, knacka och håll i mitten för att flytta den på skärmen.




Knacka i mitten igen och tryck på redigeraknappen.



Ljud: Knacka på iOS-röst, och ange sedan texten som ska läsas upp.
Förhandsvisa den genom att använda spela upp-knappen. Denna text kommer aldrig att visas, så om uttalet är konstigt, stava ordet ljudenligt.


Ljud: Knacka på Spela in, och knacka sedan på mikrofonikonen. Du kan bli tillfrågad om tillåtelse att använda mikrofonen. Tala in ditt meddelande, tryck sedan på stoppknappen för att avsluta inspelningen.

Ljud: Spela in: Spela upp-knappen låter dig förhandslyssna på inspelningen. Om du inte är nöjd med inspelningen, knacka bara på mikrofonen igen för att spela in igen.

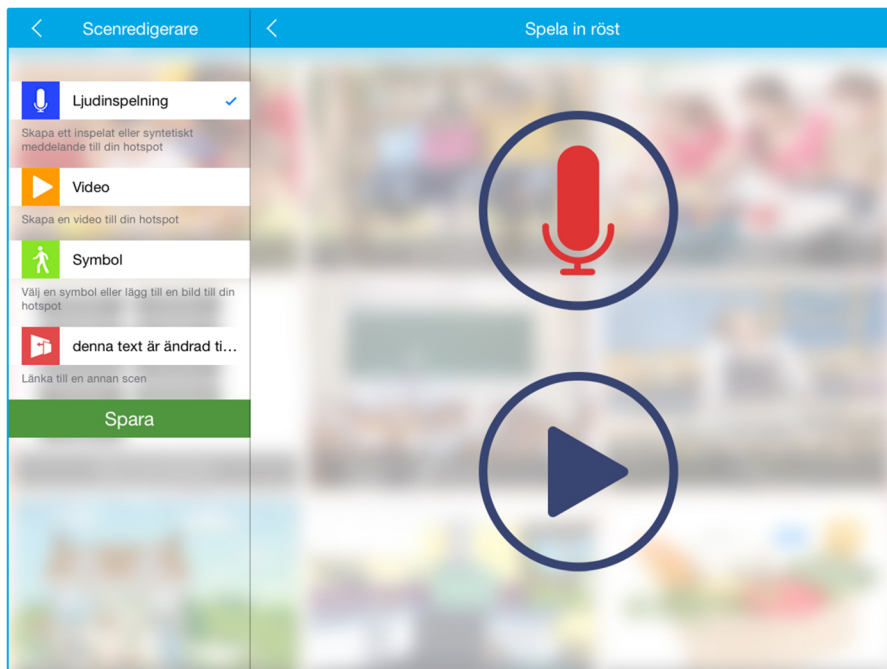




Ljud: Ta bort en inspelning du inte vill ha genom att knacka på raderaknappen.

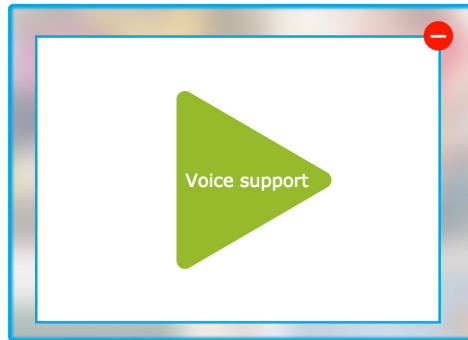

Video: Importera från Kamera och tryck på spela in-knappen. Om du är nöjd med videon, tryck Använd Video. Om du inte är nöjd, tryck Gör om.

Video: Om du redan har en video på din iPad, knacka på Välj från Galleri.

Video: Ta bort en video du inte vill ha genom att knacka på raderaknappen.

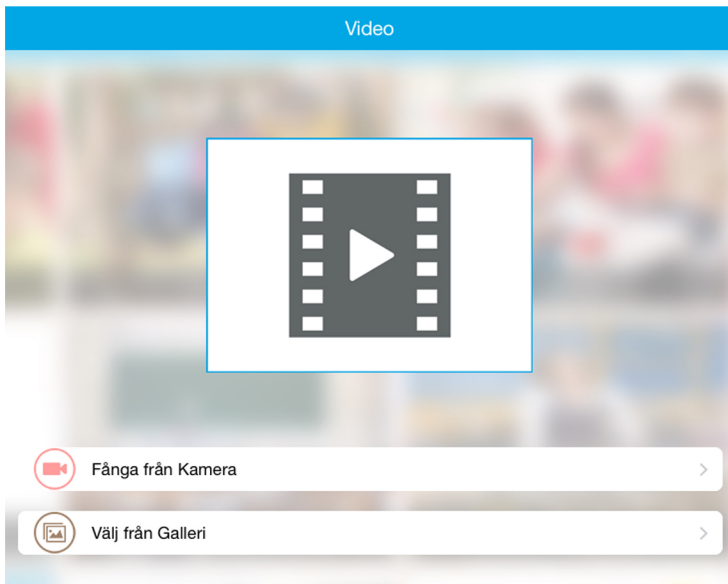




Symbol: Skriv in ett nyckelord i symbolsökning längst upp för att hitta en bild från ditt symbolbibliotek, när du har hittat en du vill ha, knacka på den och den kommer att synas precis under sökfältet.

Symbol: Knacka på mikrofonen för att spela upp ett ljud när symbolen visas.

Symbol: Knacka på Välj från fotogalleri om du redan har en bild på din iPad som du vill använda som symbol.

Symbol: Knacka på radera symbol-ikonen för att ta bort en symbol du inte vill använda.

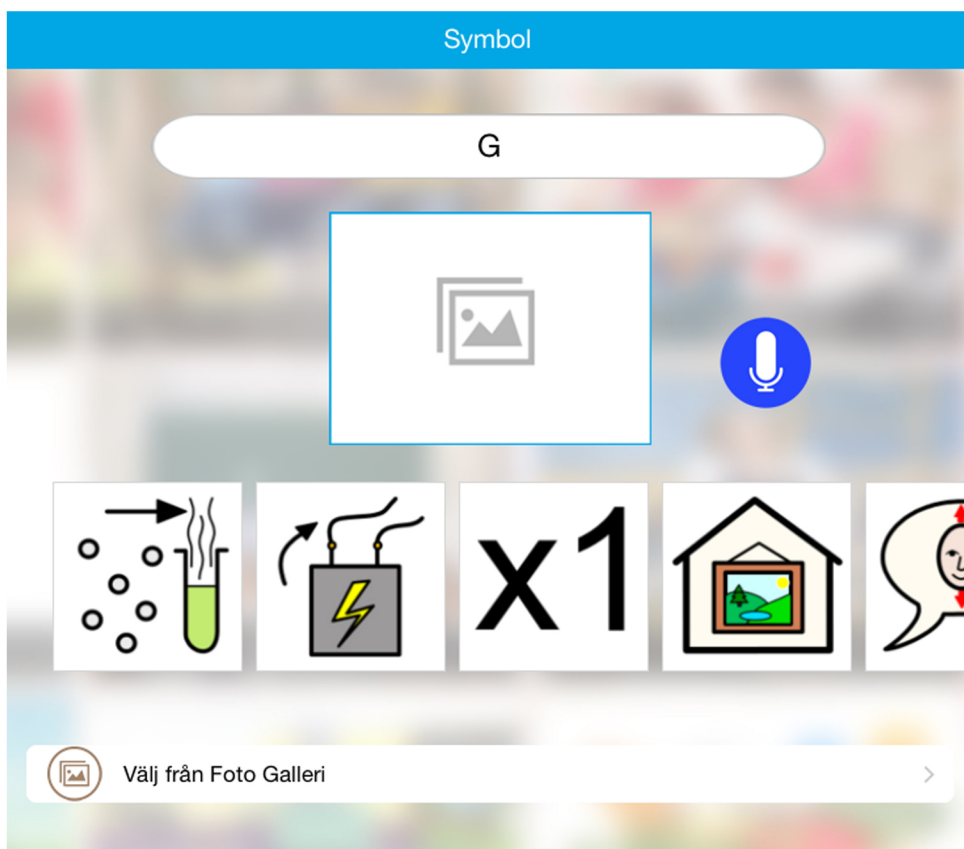



Scenlänk: Knacka på scenen som du vill länka till.

< Scenredigerare denna text är ändrad till Scen-/Uppgifts...

Ljudinspelning ✓
Skapa ett inspelat eller syntetiskt meddelande till din hotspot

Video
Skapa en video till din hotspot

Symbol
Välj en symbol eller lägg till en bild till din hotspot

denna text är ändrad ti...
Länka till en annan scen

Spara

Spara: Knacka på sparaknappen för att spara förändringar. Om du inte vill spara ändringar, knacka på bakåtknappen längst upp till vänster.

Lägg till en scen



Lägga till hotspot.

Lägg till scensymbol (denna kommer att synas längs nedre delen på skärmen).

Skriv in ett nyckelord i symbolsökning längst upp för att hitta en bild från ditt symbolbibliotek, när du har hittat en du vill ha, knacka på den och den kommer att synas precis under sökfältet.


Knacka på mikrofonen för att spela upp ett ljud när symbolen visas.

Knacka på Välj från fotogalleri om du redan har en bild på din iPad som du vill använda som symbol.

Knacka på radera symbol-ikonen för att ta bort en symbol du inte vill använda.

Tryck på Spara för att spara din scen.

Den kommer att synas i ditt scenbibliotek.

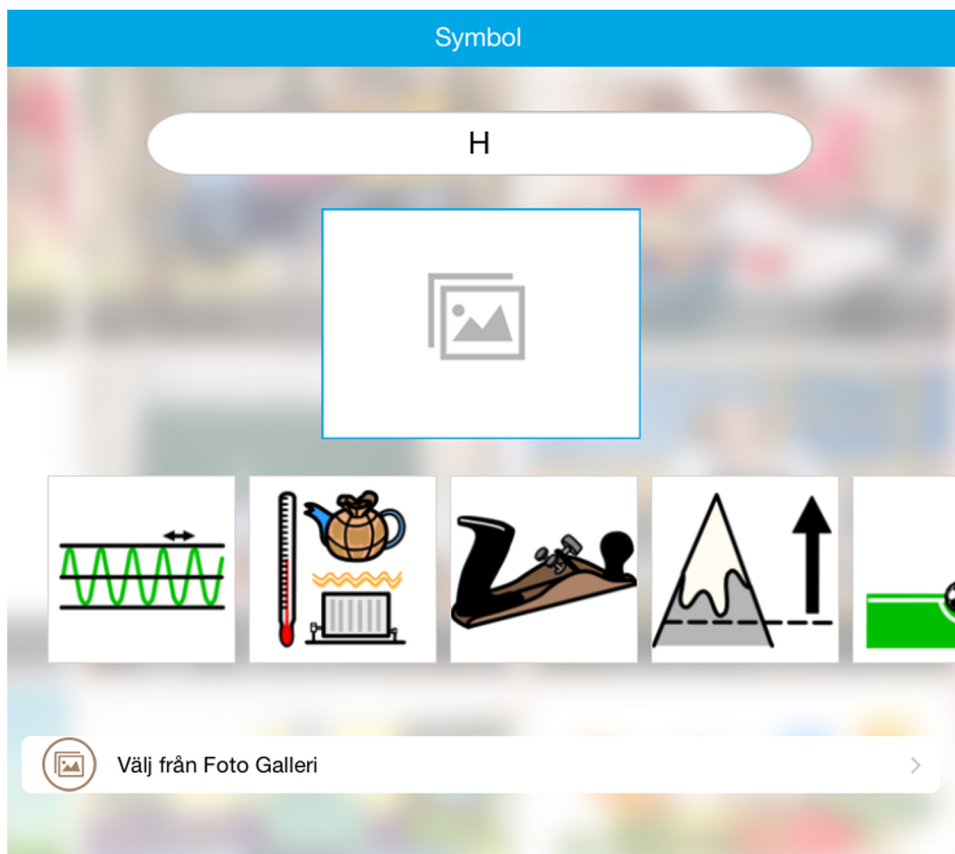




För att lägga till en ny Uppgiftspåminnelsesida, knacka på lägg till-knappen och sedan "Uppgiftslista". Namnge uppgiften, och sklicka sedan på lägg till händelse-knappen.



Uppgiftslista

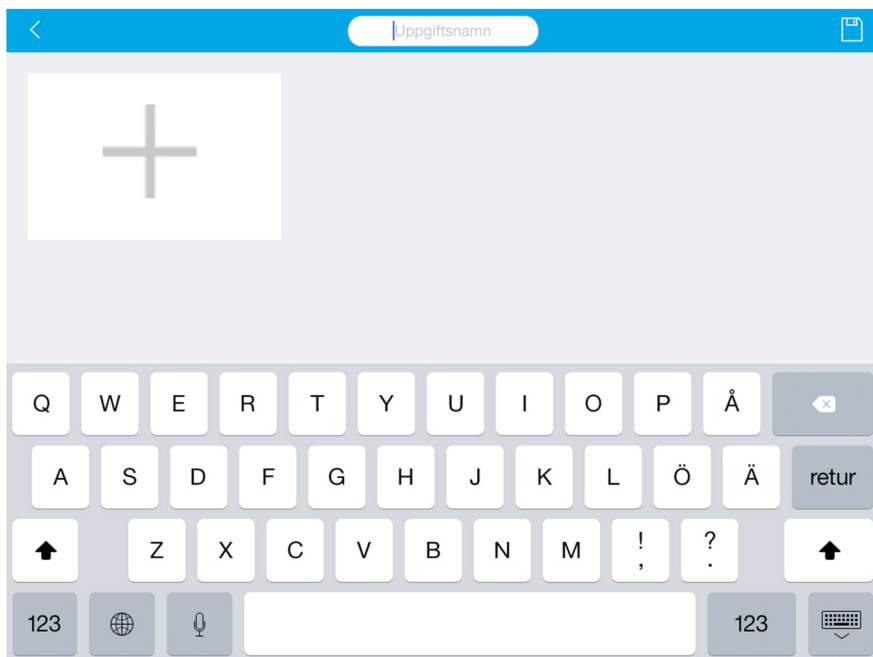

Uppgift Prompting



Text: Ange text som ger instruktioner för, eller en rubrik till, det första steget för helöa uppgiften.


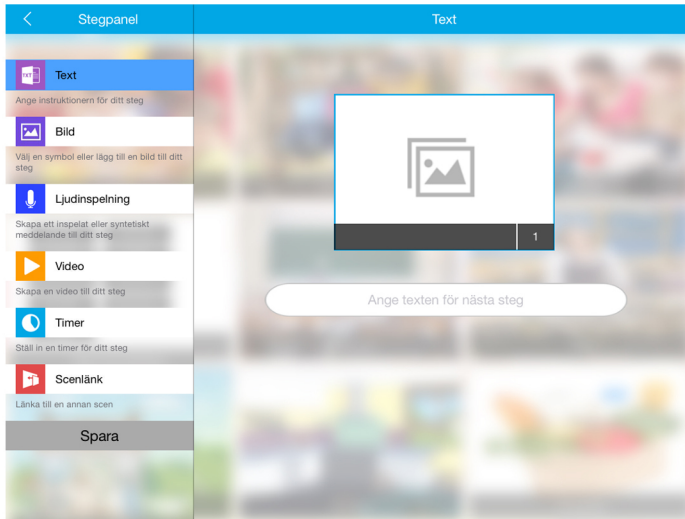



Bild: Hitta en bild som representerar detta steg av uppgiften. Välj importera från kamera, välj en bild från kamerarulleln eller sök i biblioteket efter widgitsymboler.



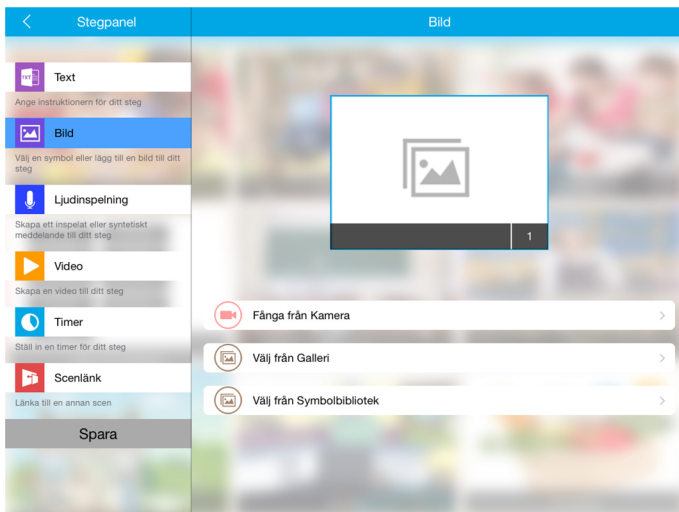


Röst: Lägg till ljudinstruktioner genom att använda Text till tal eller genom att spela in din egen röst. Om du vill använda text till tal, knacka på Röstsupport, skriv in orden du vill ha upplästa för detta steg av uppgiften.

Röst: Om du vill göra din egen inspelning, knacka på Spela in Röst och knacka sedan på mikrofonknappen för att spela in.

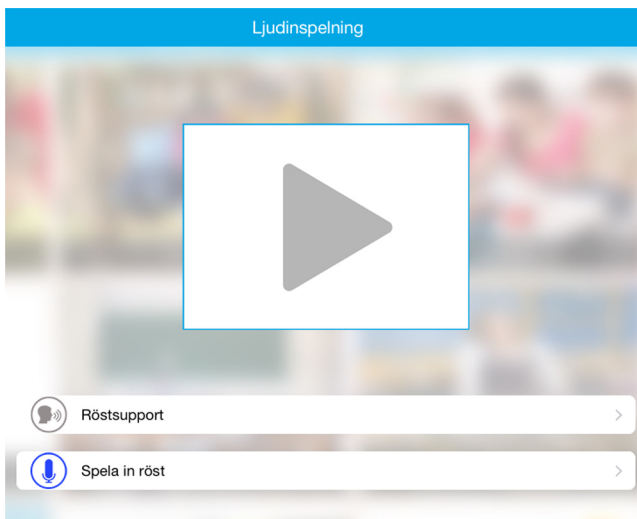


Video: Om du vill inkludera en video till steget, kan du spela in en genom att använda Importera från Kamera, eller lägga till en video från ditt iPad-galleri.

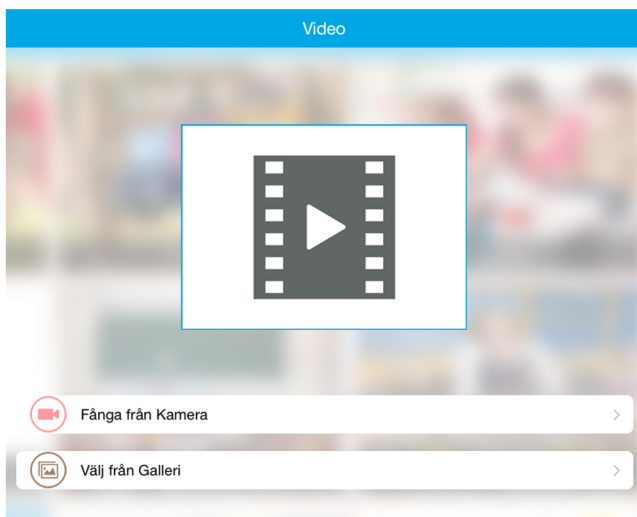



Timer: Om detta steg behöver utföras under en bestämd tidsperiod, lägg till en nedräkningstimer. Skrolla för att ställa in tiden i minuter och sekunder. Knacka på automatisk timer för att den ska starta automatiskt genom att man knackar på timerknappen i scenen (annars kan du knacka på timerknappen, och sedan trycka på sätt igång timer när du vill börja).

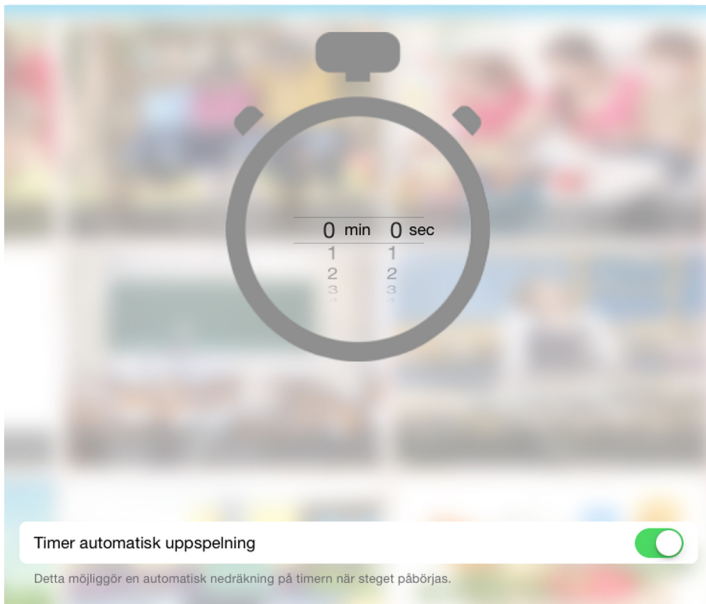

Scenelink: Du kan länka till en annan scen som kan ge fördjupade detaljer åt ett specifikt steg. Knacka på scenen du vill länka till. När du har lagt till alla medier du vill ha i ett steg, knacka på sparaknappen, och gå sedan tillbaka till uppgiften i redigeringsläge.

För att lägga till ett nytt steg, knacka igen på lägg till steg-knappen. När du har lagt till alla steg till uppgiften, knacka på spara i högra hörnet överst. Uppgiftssidor läggs till i biblioteket. Du behöver bara knacka för att öppna sidan. När du vill börja en uppgift, knacka på spelaknappen. Du kommer att se det första steget.




Längs den nedre kanten på pop-up-fönstret syns symboler som visar vilken instruktionsmedia som finns i steget.

Knacka på en symbol för att spela upp mediet (om du har satt en timer, kommer även den att synas här, knacka för att öppna timern och börja nedräkningen för steget).

När du gjort klart ett steg, knacka på bock-knappen och knacka sedan på nästa steg.

Upprepa tills du är klar med uppgiften.

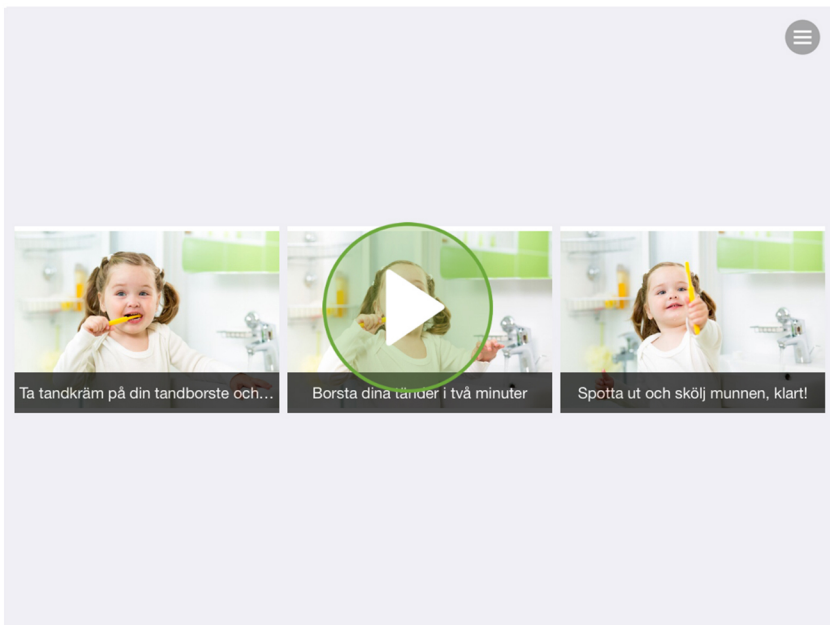


För att komma tillbaka till biblioteket, knacka på listikonen längst uppö till höger.

Lägg till en kommunikationsbok genom att knacka på bokikonen, knacka på lägg till.


Knacka på bildikonen för att lägga till en bild (från din kamerarulle eller importerad direkt från iPad-kameran).

Namnge din bok, klicka sedan på nästa-knappen.

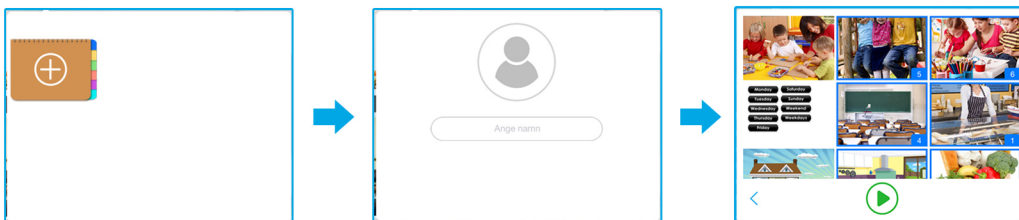




Knacka på scenerna du vill inkludera i din kommunikationsbok.
Tryck på spela-knappen för att sammanställa.

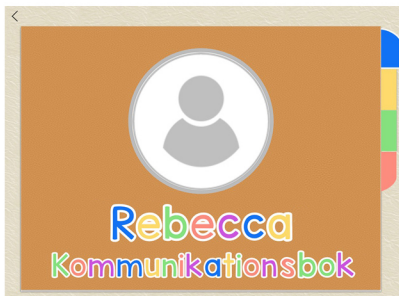

För att titta i en kommunikationsbok som du redan har skapat, knacka på bokikonen, och sedan på den bok du vill se.

Du kan schemalägga att visa en scen vid en specifik tid, och du kan lägga till en scen till ett visuellt schema för att visa en dags eller en veckas aktiviteter.

Knacka på kalenderknappen för att se dina scemalagda aktiviteter.

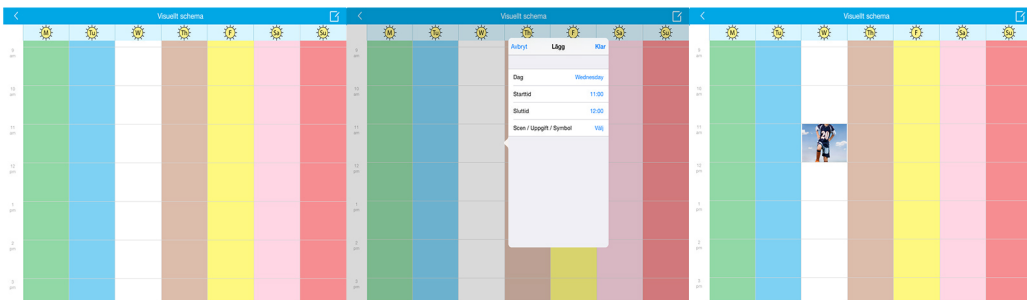

Knacka på ett tidsblock för att lägga till en scen till schemat.

Du kan ändra tid i pop-up-fönstret som visas, knacka på välj scen för att ta fram och välja från ett galleri med dina scener.

Knacka på redigeraknappen om du vill ändra eller radera scener från det visuella schemat.

Knacka på scenen du vill ändra och välj Redigera eller Radera.

För att omorganisera ditt scenbibliotek tryck på Ordna-knappen, tryck och håll sedan på en scen du vill flytta.

Dra och släpp den till den plats du föredrar.

För att redigera en existerande scen knacka på redigeraknappen, sedan på scenen du vill redigera.

Genom att trycka på redigera kommer du tillbaka till redigeräläget.

Genom att trycka på radera kommer du att permanent radera scenen från din app (såvida du inte har en backup av scenen kommer den inte att kunna återskapas vid senare tillfälle)



Skapa en kommunikationsbok genom att knacka på kommunikationsboksikonen.

Tryck på "lägg till bok"-ikonen

Du kan lägga till ett omslagsfoto från ditt iPad-galleri eller genom att ta ett nytt foto direkt.

Namnge boken genom att knacka på textfältet.

Knacka på "nästa sida"-pilen.

Skrolla genom ditt bibliotek, knacka på scener du vill lägga till, i den ordning du vill lägga till dem.

Genom att knacka på en scen en andra gång kommer att radera den från kommunikationsboken.

När du är klar, tryck spela.

Du kan navigera i din kommunikationsbok genom att trycka på tabbarna längs sidan, eller genom att svepa upp och ner.

Tryck på "scenschemaläggning"-knappen.

En kalender visas och visar scener du redan schemalagt.

Tryck på "lägg till"-knappen för att schemalägga en ny scen.

Välj vilken dag i veckan du vill att den ska visas, tillsammans med en starttid och sluttid.

Tryck Välj Skärm och skrolla genom ditt scenbibliotek.

Knacka på scenen du vill schemalägga.

Använd "ta bort"-knappen för att ta bort en scen från schemat.

Knacka den en gång, knacka sedan på "ta bort"-ikonen bredvid scenen du vill ta bort från schemat.

Inställningar → Hotspot.


Ändra utseendet på dina hotspots.

Inställningar → Hotspot → Markerat läge.

Ändra bårdstilen på dina hotspots.

Inställningar → Hotspot → Markerad Färg.

Välj en av fem ljusa, synliga färger till din hotspotbård.

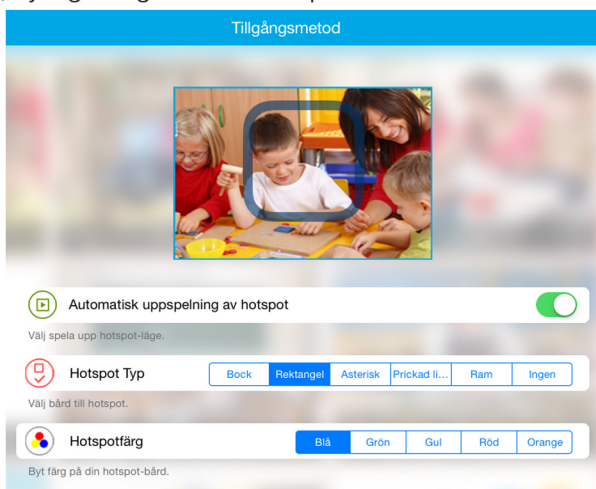



Inställningar → Åtkomstmetoder.

Om du vill ändra till knappåtkomst, eller rör varsomhelst åtkomst, kan du göra det här.


Inställningar → Direkt åtkomst inställningar

Sätt på kraftfördröjning.

Denna inställning förhindrar oavsiktliga dubbelknackningar genom att låsa skärmen en stund efter att du har knackat på den en första gång.

Inställningar → iOS-röst


Använd Rösthastighetsreglaget för att höja eller sänka rösthastigheten i "text till tal" i appen.

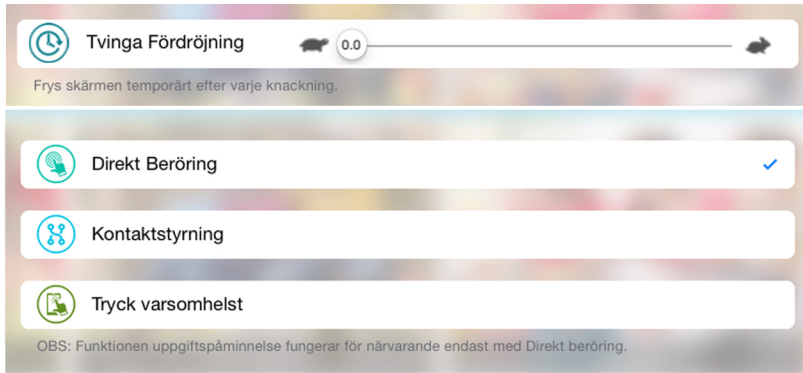

Inställningar → Om Scene & Heard.


Härifrån kan du hitta en nedladdningslänk till användarmanualen, hitta en länk för att betygssätta vår app, e-posta oss en supportfråga

(support@therapy-box.co.uk), eller rapportera en bugg så att vi kan fixa den till nästa uppdatering.

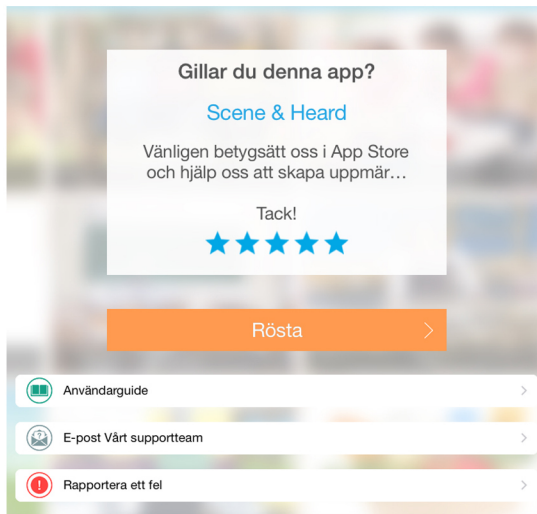



Inställningar → Om Therapy Box. Hitta mer information om Therapy Box, vår app-utveckling och andra appar som vi har arbetat med.

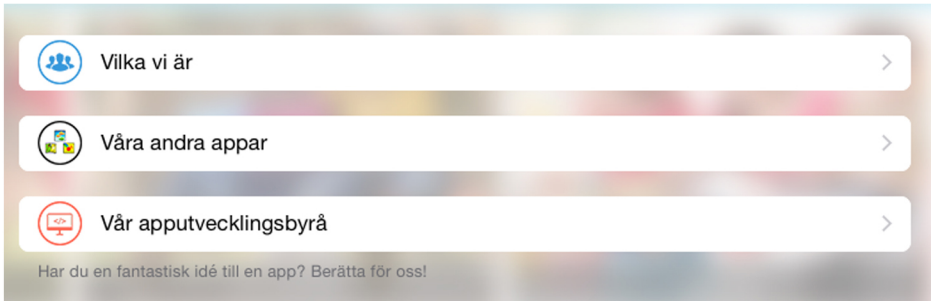

Inställningar → Följ oss. Det finns många sätt att hålla kontakten med oss och få reda på det senaste. Hitta dem alla här.

